


Test Rápido qSARS-CoV-2 IgG/IgM: Cellex

Descripción: El test Rápido qSARS-CoV-2 IgG/IgM es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 **IgG e IgM**.

El Test **o dispositivo** consta de:

1) Una superficie de conjugado color burdeos que contiene antígenos recombinantes SARS-CoV-2 conjugados con oro coloidal (conjugados SARS-CoV-2) y conjugados IgG-gold de conejo

2) una tira de membrana de nitrocelulosa que contiene la banda G recubierta con anti-IgG humana, la banda M que está recubierta con anti-IgM humana, y la banda C que está recubierta con anti-IgG de conejo obtenido en cabra.

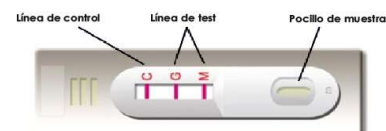

Características técnicas

- Análisis en 15 minutos.
- Muestra de partida: Sangre/ Suero/ Plasma.
- Robusto.
- Proporciona eficacia y exactitud diagnóstica a pacientes con sospecha 2019-nCoV.
- Proporciona una guía para el tratamiento y direccionamiento de pacientes.
- Proporciona información epidemiológica.

Reactivos y materiales

	Tamaño de Kit	1	25 test
Componentes	Test Cassette	1	25
	Diluyente de muestras	1	1
	Pipeta de transferencia (#)	1	25
	Folleto IFU	1	1

Referencia

5513C

Nombre:

Cellex qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test: 25 test

Mercado CEIVD


Cellex, Inc.
USA office
76 TW Alexander Drive,
Research Triangle Park, NC 27709-0002, USA
Tel: 1-919-314-5535,
Fax: 1-919-314-5336,
E-mail: info@cellex.us

Rafer INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
PARA LABORATORIO

www.rafer.es

Barcelona

93 645 50 28
barcelona@rafer.es

Bilbao

94 499 85 80
bilbao@rafer.es

La Coruña

981 93 89 26
galicia@rafer.es

Madrid

91 365 15 70
madrid@rafer.es

Málaga

639 359 792
malaga@rafer.es

Sevilla

954 369 334
sevilla@rafer.es

Valencia

96 340 48 00
levante@rafer.es

Zaragoza

976 23 74 00
rafer@rafer.es

Lisboa

21 154 19 98
lisboa@rafer.es